


科莱瑞迪

Klarity®

后装转运床

- 轻松
- 安全
- 灵活

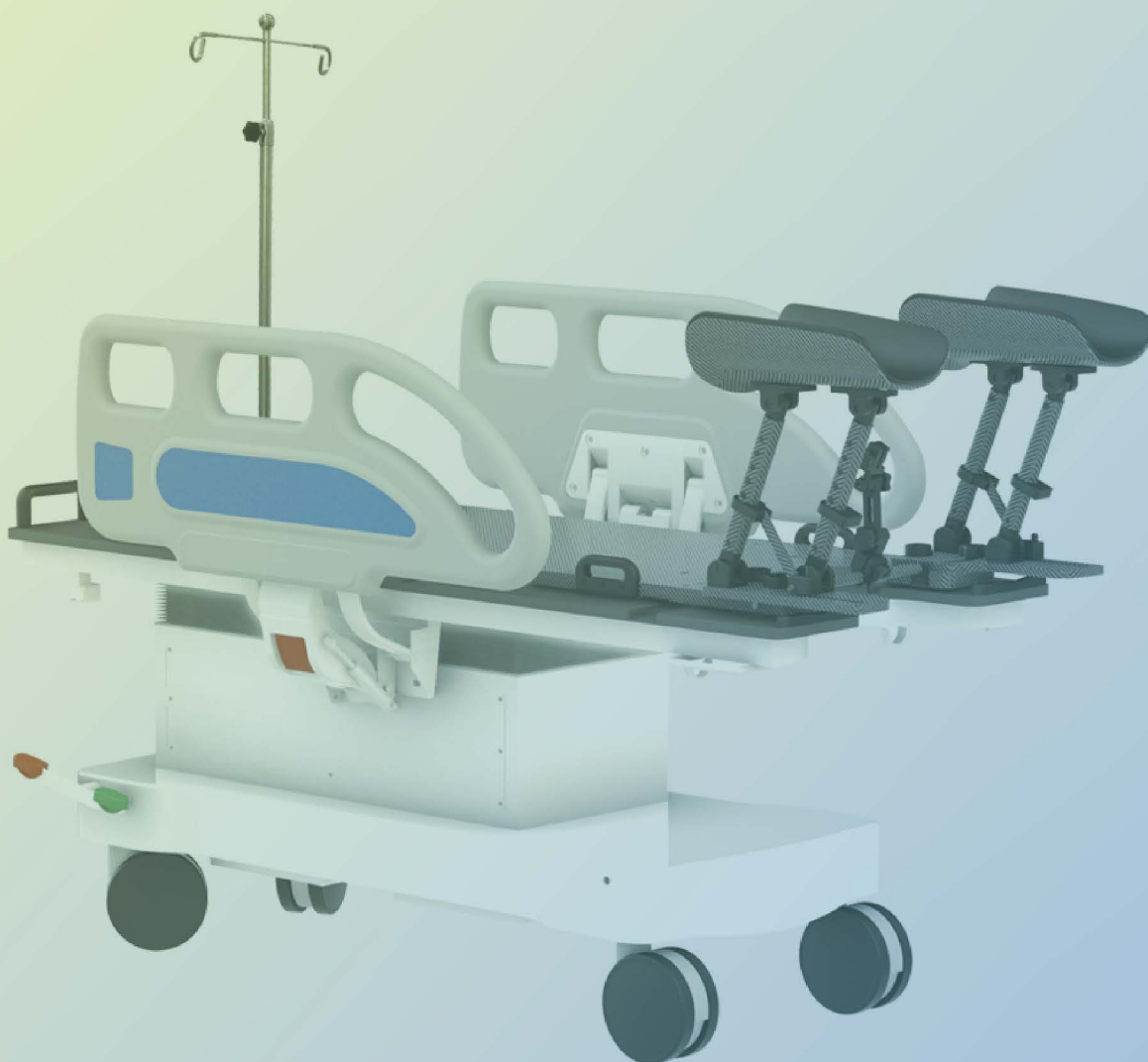

后装转运床

科莱瑞迪新一代后装转运床（电动移位车）从操作安全性、可靠性、方便性等方面做了提升。特别优化了过接定位架，让转移变得更加安全、更加轻松。



- 德国进口医用车轮，摩擦力小，轻松推动
- 贴近临床使用需求的车轮档位设计，可实现一名医护人员对患者进行不同机房间的转运
- 数字化显示面板，精确实时显示电池状态和功率
- 可适配定位膜和真空袋，提高固定精度和舒适性，减少转运、治疗过程中的主动和被动位移
- 配备免维护蓄电池供电
- 增配输液架


● 轻松



过接定位架让转移更安全、更轻松




电动升降，一键控制

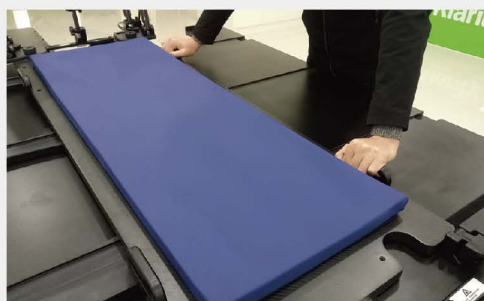

一人即可轻松完成转移

● 安全

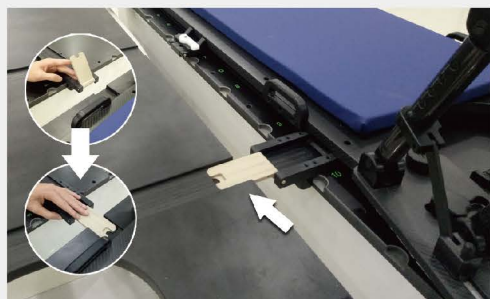

过接装置:

过接定位架带有对接块，可与移动车凹槽对齐，保证转移的平顺、安全。



气弹簧护栏:

移动车两侧带护栏保护，避免病人的意外坠落；护栏结实、精致，气弹簧缓冲让操作更加方便。



锁紧固定装置:


移动车带锁紧保护装置，可固定移动底板。



锁紧固定装置:

过接定位架带锁紧装置，可固定移动底板。

● 灵活

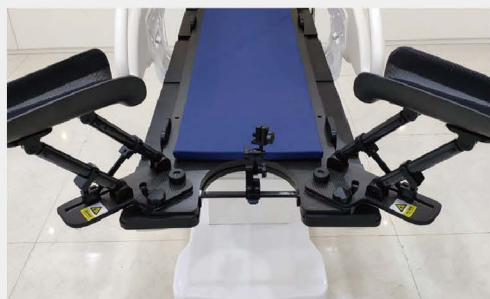

左右脚托支架多维可调:

- 小腿支撑俯仰角25档可调
- 小腿支撑高度2档可调
- 脚托张开角度0-102°可调




施源管夹紧装置可适配各种型号后装治疗机:

- 5轴360°旋转，可朝任意方向固定，在患者转运、治疗过程中保持位置不变
- 一键锁紧

科莱瑞迪后装转运床参数

产品编码：	KT-810C
标配：	移动车（1），移动底板（1），脚托支架（左右各1），输液架（1） 过接定位架（1），后装夹紧装置（1），PU床垫（1），PU头枕（1）
移动车：	升降范围：60-85cm
	自重：100千克，最大承重：135千克
	免维护蓄电池（2个）：12伏/6安时
脚托支架：	材质：碳纤维+POM，不含金属
	小腿支撑俯仰角25档可调
	小腿支撑高度2档可调
	脚托张开角度0-102°可调
移动底板：	135x47x2cm
过接定位架：	92x69.5x5.8cm，适配45cm、50cm、53cm宽度的床板
	单个对接块最大承重319千克
后装夹紧装置：	施源管夹紧装置：5轴360°可调，一键锁紧
PU床垫：	110x37x2.5cm
PU头枕：	30.1x23.6x5cm
选配：	· 体部真空袋R75105-24NLR-O：115.5x73cm，填充量24升 · 体部定位膜：R323-B2436，29x46cm，2.4mm，36%网孔

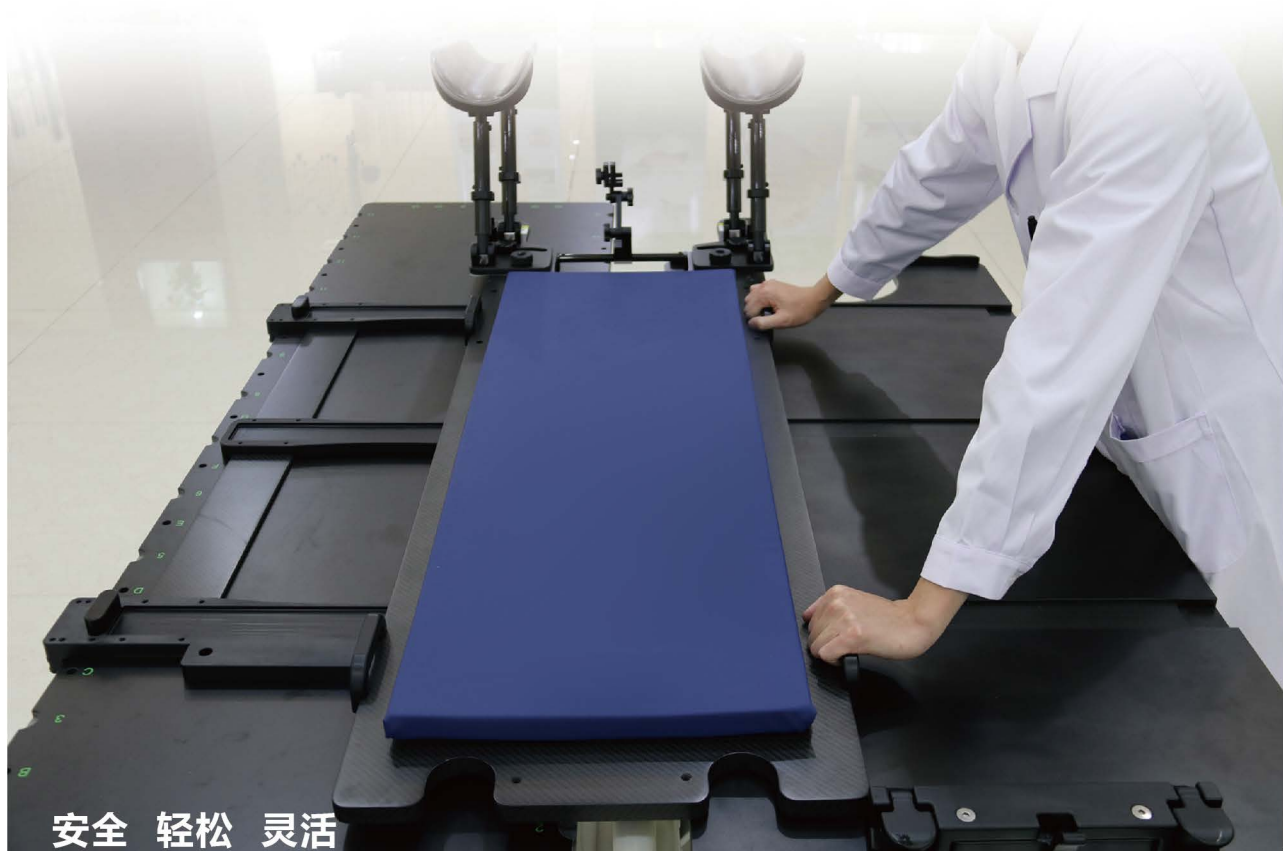

安全 轻松 灵活