

Klarity

# 科莱瑞迪 卡条式多功能 体位固定系统

卡条式多功能固定架可与U型膜及多款卡条式定位膜适配，实现多个部位的固定方案



# 卡条式多功能体位固定系统

卡条式多功能固定架可与U型膜及多款卡条式定位膜适配，实现多个部位的固定方案。



**MR** MR兼容款可选

编码：碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF

MR卡条式多功能固定架 R605-12FGF

规格：133cm x 54cm

配置：底板，EVA卡条，分腿固定装置

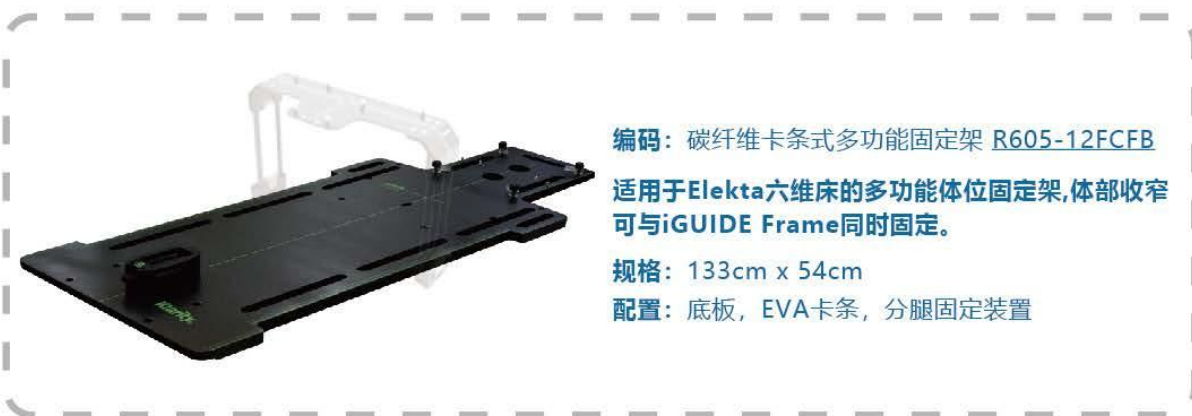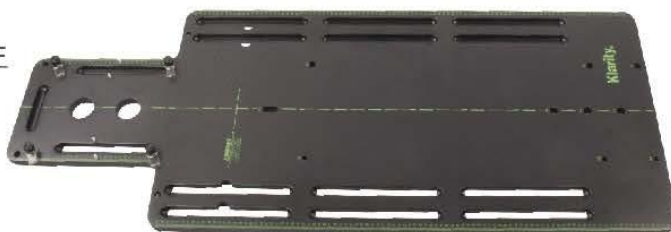


编码：碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCFB

适用于Elekta六维床的多功能体位固定架,体部收窄可与iGUIDE Frame同时固定。

规格：133cm x 54cm


配置：底板，EVA卡条，分腿固定装置

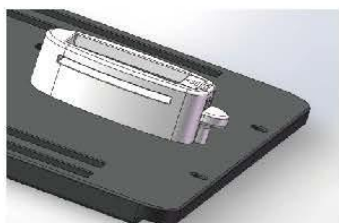

分腿固定装置具有一定高度，可让定位膜在患者裆部位置的固定变得更加方便



创新性设计的EVA卡条，一个卡条可用于两种不同长度边条的固定（图①、图②）

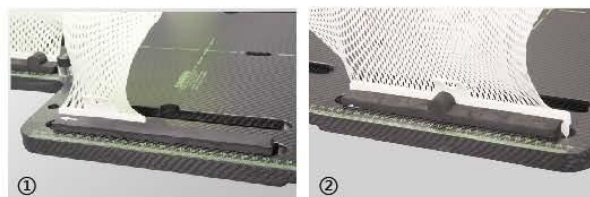

## 三个模块灵活组合

### ● 手臂支撑架

手臂支撑架可与多功能固定底板稳固相接。更多可调角度和更大范围的适形度有效提高患者舒适度，减少非主动位移。对改善乳腺及胸腹部肿瘤的体位固定重复性精度及治疗舒适性具有良好的临床推荐意义。



**手臂托高度：** 20-46°之间有6个可调角度，并可横向做6挡外扩

**手臂托角度：** 可在0-170°范围内旋转

**腕托高度：** 18.5-25.4cm之间分6挡可调，一键锁紧/解锁设计

**编码：** 碳纤维手臂支撑架 R605-2WCE，MR手臂支撑架 R605-2WGF

**配置：** 底板，手臂托（左右各一），腕托（左右各一）

### ● 腿部支撑装置



腿部支撑装置可提高摆位时的舒适性，特别是解决了由于病理性原因导致腿不能伸直的患者的摆位难题，能使患者得到更舒适的治疗体位，减少分次内摆位误差的产生。

**可调范围：** 0-46cm滑动调节，带刻度标记，可一键锁紧/解锁

**编码：** 碳纤维腿部支撑装置 R612-LCE，MR腿部支撑装置 R612-LGF

有机玻璃腿部支撑装置 R612-L

**配置：** 膝部支架（含底板），膝部垫，增高垫（2个）



## 一个产品实现多种固定方案

### 头部和头颈肩固定



碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF  
适配105系列卡条式头膜



碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF  
适配206和207系列卡条式(头)颈肩膜



碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF  
适配U型头膜

- 适配头枕: R507 系列透明头枕
- 可搭配腿部支撑装置使用提高病人舒适度
- 可搭配头颈肩部定位袋 R7222-3NLR2-O 使用

### 头部和头颈肩固定

碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF 搭配碳纤维手臂支撑架 R605-2WCF;  
适配颈胸部定位膜 R313A-2436 和 RD313A-2436。



- 适配头枕: R507 系列透明头枕
- 可搭配腿部支撑装置使用提高病人舒适度
- 可搭配体部定位袋 R7569-12NLR-O、R7586-11NLR-O 使用

## 一个产品实现多种固定方案

### 上胸部固定

碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF 搭配碳纤维手臂支撑架 R605-2WCF；  
适配901系列卡条式体膜。



- 适配头枕：R507 系列透明头枕
- 可搭配腿部支撑装置使用提高病人舒适度
- 可搭配体部定位袋 R7569-12NLR-O、R7586-11NLR-O 使用

### 下腹部固定

碳纤维卡条式多功能固定架 R605-12FCF 搭配碳纤维手臂支撑架 R605-2WCF；  
适配腹部定位膜 R402 和 RD402L-3242。



- 适配头枕：R507 系列透明头枕
- 可搭配体部定位袋 R7569-12NLR-O、R7586-11NLR-O 使用

### 乳腺固定

碳纤维卡条式多功能固定架 **R605-12FCF** 搭配碳纤维手臂支撑架 **R605-2WCF**；  
联合使用下颌部定位膜 **R313B-2436** (或 **RD313B-2436**)和  
腹部定位膜 **R313C-2436** (或 **RD313C-2436**)做乳腺固定。

- 适配头枕：R507 系列透明头枕
- 可搭配腿部支撑装置使用提高病人舒适度
- 可搭配体部定位袋 **R7569-12NLR-O**、**R7586-11NLR-O** 使用


下颌部定位膜可有效保持病人头部偏向健侧，使锁骨上靶区更好暴露。



使用塑形垫可提高病人在保持头部长时间偏向健侧时的舒适度。

### 全身固定

碳纤维卡条式多功能固定架 **R605-12FCF** 联合使用206(或207)系列；  
卡条式(头)颈肩膜和901系列体膜做全身固定。

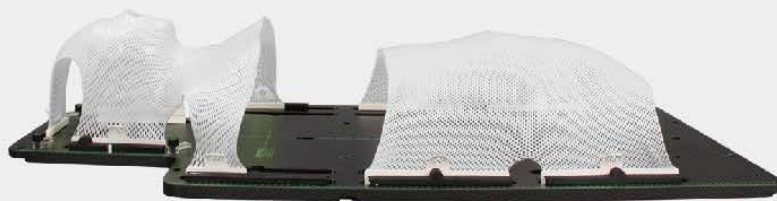

- 适配头枕：R507 系列透明头枕
- 可搭配体部定位袋 **R7231-15NLR-O** 使用



## 配套耗材

编 码	规 格
<b>头部定位膜 (U型)</b>	
R102-2436	256x265mm, 2.4mm, 36%网孔
R102-3242	256x265mm, 3.2mm, 42%网孔
R102-2436-5M	256x315mm, 2.4mm, 36%网孔
R102-3242-5M	256x315mm, 3.2mm, 42%网孔
R420W-2436	256x265mm, 2.4mm, 36%网孔
R420W-3242	256x265mm, 3.2mm, 42%网孔
R420W-2436-5M	256x315mm, 2.4mm, 36%网孔
R420W-3242-5M	256x315mm, 3.2mm, 42%网孔
R101	256x271mm, 2.4mm, 特殊网孔
<b>头部定位膜 (卡条式)</b>	
R105-2422	338x324mm, 2.4mm, 22%网孔
R105-2436	338x324mm, 2.4mm, 36%网孔
RD105-2422	339x325mm, 2.4mm, 22%网孔, 新式边条
RD105-2436	339x325mm, 2.4mm, 36%网孔, 新式边条
R105-2422N	338x324mm, 2.4mm, 22%网孔, 带鼻定位
R105-2436N	338x324mm, 2.4mm, 36%网孔, 带鼻定位
RD105-2422N	339x325mm, 2.4mm, 22%网孔, 带鼻定位, 新式边条
RD105-2436N	339x325mm, 2.4mm, 36%网孔, 带鼻定位, 新式边条
<b>颈肩部定位膜 (卡条式)</b>	
R206-2422	484x343mm, 2.4mm, 22%网孔
R206-2436	484x343mm, 2.4mm, 36%网孔
RD206-2422	486x343mm, 2.4mm, 22%网孔, 新式边条
RD206-2436	486x343mm, 2.4mm, 36%网孔, 新式边条
<b>头颈肩部定位膜 (卡条式)</b>	
R207-2422N	454x479mm, 2.4mm, 22%网孔, 带鼻定位
R207-2436N	454x479mm, 2.4mm, 36%网孔, 带鼻定位
RD207-2422N	455x479mm, 2.4mm, 22%网孔, 带鼻定位, 新式边条
RD207-2436N	455x479mm, 2.4mm, 36%网孔, 带鼻定位, 新式边条
<b>颈胸部定位膜 (卡条式)</b>	
R313A-2436	2.4mm, 36%网孔
RD313A-2436	2.4mm, 36%网孔, 新式边条
<b>体部定位膜 (卡条式)</b>	
R901-5	463x480mm, 2.4mm, 36%网孔
R901-1	463x480mm, 3.2mm, 42%网孔
RD901-2436	463x480mm, 2.4mm, 36%网孔, 新式边条
RD901-3242	463x480mm, 3.2mm, 42%网孔, 新式边条
R901S-2436	351x480cm, 2.4mm, 36%网孔
R901S-3242	351x480cm, 3.2mm, 42%网孔
RD901S-2436	351x480cm, 2.4mm, 36%网孔, 新式边条
RD901S-3242	351x480cm, 3.2mm, 42%网孔, 新式边条
<b>腹部定位膜 (卡条式)</b>	
R402	463x480mm, 2.4mm, 22%网孔
RD402L-3242	463x480mm, 3.2mm, 42%网孔, 新式边条
<b>下颌部定位膜 (卡条式)</b>	
R313B-2436	2.4mm, 36%网孔
RD313B-2436	2.4mm, 36%网孔, 新式边条
<b>腹部定位膜 (卡条式)</b>	
R313C-2436	2.4mm, 36%网孔
RD313C-2436	2.4mm, 36%网孔, 新式边条
<b>人体定位袋 (真空袋)</b>	
R7222-3NLR2-O	头颈肩部定位袋, 61.5x62cm, 填充量3L
R7569-12NLR-O	体部定位袋, 53x94.5cm, 填充量12L
R7586-11NLR-O	体部定位袋, 52x79cm, 填充量11L
R7231-15NLR-O	体部定位袋, 52x135cm, 填充量15L